



CooperVision®
Live Brightly.®

CooperVision® Israel

קטלוג מוצרים



תוכן עניינים

עדשות מדף:

עדשות מגע יומיות
עדשות מגע דו-שבועיות
עדשות מגע חודשיות
עדשות מגע מולטיפוקל

עדשות מיוחדות:

עדשות מגע רכות ספריות
עדשות מגע רכות טוריות
עדשות מגע רב מוקדיות
עדשות מגע גמישות נושמות (GP)
קרטוקונוס וקרניות אי רגולריות:
משפחת SOFT K
עדשות סמי סקלרליות
עדשות היברידיות ו-ORTHOKERATOLOGY
תמיסות ומוצרים משלימים

מדריכי התאמה, מחשבונים וכלי עזר:

יישומן OptiExpert™
מדריך התאמה - עדשות מגע טוריות
מדריך התאמה - עדשות מגע מולטיפוקל
מדריך התאמה - עדשות מגע MiSight® 1 day





מנהלים את המיופיה עם משפחת

MiSight®

הוכח מחקרית

כבר מגיל 6!

משקפי MiSight®

יעילים בהאטת המיופיה החל מגיל 6^{Δ1}



| שם המוצר / חומר גלם | קוטר | כוח ספרי | צילינדר | מחיר מומלץ |
|------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------|---|
| MiSight® משקפי Trivex (1.53) | 70 | -0.25 to -8.00 (0.25 D steps) | 0.00 to -2.00 (0.25 D steps) | מחיר לזוג עדשות: 360 ₪ מחיר לצרכן: 1,490 ₪ לזוג ניתן לקבל שירות מסגור בעלות של 35 ₪ |

עדשות המגע MiSight® 1 day

היחידות בישראל עם אישור FDA*



| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | מחיר מומלץ |
|--|-------|------|-----------------------------------|--------------|--|
| MiSight® 1 day Omafilcon A תכולת נוזל: 60% | 8.7 | 14.2 | -0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 | 0.25 0.50 | קופסא: 175 ₪ עסקה שנתי: 165 לקופסא, 3,960 ₪ |

* נכון לתאריך 1.4.24

1. SGV data on file 2021. Control of Myopia Using Peripheral Diffusion Lenses: Efficacy and Safety Study, 24-month results (n = 256, 14 North American sites).

Δ Compared to control spectacle lenses. Analysis based on parent responses to in-office question, "Does your child remove their spectacles for any near vision activities?" (n=51 test, n=62 control). For the full study cohort, reduction in progression of spherical equivalent refraction and axial length from baseline over 24 months was 47% and 24% on average respectively.

עדשות מנע ספריות - יומיות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | מחיר מומלץ |
|---|------------------------------------|------|---|------------------------------|--|
|  <p>MyDay® Stenfilcon A תכולת נוזל: 54%</p> | 8.4 | 14.2 | -0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.50 to +5.00 +5.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | קופסא: 195 ע"ש עסקה שנתית: 145 לקופסא, ע"ש 3,480 |
|  <p>DISPO Bio 1 day Stenfilcon A תכולת נוזל: 54%</p> | 8.4 | 14.2 | -0.50 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.50 to +5.00 +5.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | קופסא: 195 ע"ש עסקה שנתית: 145 לקופסא, ע"ש 3,480 |
|  <p>clariti® 1 day Somofilcon A תכולת נוזל: 56%</p> | 8.6 | 14.1 | -0.50 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.50 to +6.00 +6.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | קופסא: 30: ע"ש 165 עסקה שנתית: 125 לקופסא, ע"ש 3,000 קופסא 90: עסקה שנתית: 315 לקופסא, ע"ש 2,520 |
|  <p>Proclear® 1 day Omafilcon A תכולת נוזל: 60%</p> | 8.7 | 14.2 | -0.50 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.50 to +5.00 +5.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | קופסא: 135 ע"ש עסקה שנתית: 100 לקופסא, ע"ש 2,400 |
|  <p>Biomedics® 1 day Extra Ocufilcon D תכולת נוזל: 55%</p> | 8.6 (-power) 8.8 (+power) | 14.2 | -0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +5.00 +5.50 to +6.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | קופסא: 110 ע"ש עסקה שנתית: 85 לקופסא, ע"ש 2,040 |



עדשות מנגע טוריות - יומיות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | צילינדר | זווית | מחיר מומלץ |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------------|---|---|
|  <p>MyDay® toric Stenfilcon A תכולת נוזל: 54%</p> | 8.6 | 14.5 | Plano to -6.00 | 0.25 | -0.75 -1.25 -1.75 | 10° to 180° (10° steps) | קופסא: ש 235 |
| | | | Plano to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.50 to -6.00 | 0.25 0.50 0.50 | -2.25 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° | עסקה שנתית: 175 לקופסא, ש 4,200 |
| | | | -6.50 to -10.00 +0.25 to +6.00 | 0.50 0.25 | -0.75 -1.25 -1.75 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° | |
|  <p>DISPO Bio 1 day toric Stenfilcon A תכולת נוזל: 54%</p> | 8.6 | 14.5 | Plano to -6.00 | 0.25 | -0.75 -1.25 -1.75 | 10° to 180° (10° steps) | קופסא: ש 235 |
| | | | Plano to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.50 to -6.00 | 0.25 0.50 0.50 | -2.25 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° | עסקה שנתית: 175 לקופסא, ש 4,200 |
| | | | -6.50 to -10.00 +0.25 to +6.00 | 0.50 0.25 | -0.75 -1.25 -1.75 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° | |
|  <p>clariti® 1 day toric Somofilcon A תכולת נוזל: 56%</p> | 8.6 | 14.3 | +0.00 to -6.00 | 0.25 | -0.75 -1.25 -1.75 | 10° to 180° (10° steps) | קופסא: ש 205 |
| | | | | | -2.25 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° | עסקה שנתית: 155 לקופסא, ש 3,720 |
| | | | -6.50 to -9.00 | 0.50 | -0.75 -1.25 -1.75 | 10°, 20°, 60°, 70°, 80° , 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180° | |
| | | | | | -2.25 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° | |
|  <p>Biomedics® 1 day Extra toric Ocufilecon D תכולת נוזל: 55%</p> | 8.7 | 14.5 | Plano to -6.00 -6.50 to -7.00 | 0.25 0.50 | -0.75 -1.25 -1.75 | 20°, 90°, 160°, 180° | קופסא: ש 195 |
| | | | -7.50 to -10.00 | 0.50 | -0.75 -1.25 -1.75 | 90°, 180° | עסקה שנתית: 150 לקופסא, ש 3,600 |



עדשות מגע ספריות דו שבועיות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | מחיר מומלץ |
|---|-------|------|---|------------------------------|------------|
|  Avaira Vitality™ fanfilcon A תכולת נוזל: 55% | 8.4 | 14.2 | +0.25 to -6.00 +6.50 to +8.00 -0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | ₪ 190 |

עדשות מגע ספריות - חודשיות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | מחיר מומלץ |
|--|------------|------|--|------------------------------|------------------|
|  DISPO BIO Comfilcon A תכולת נוזל: 48% | 8.6 | 14.0 | -0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | ₪ 335 |
|  Biofinity® Comfilcon A תכולת נוזל: 48% | 8.6 | 14.0 | -0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | ₪ 335 |
|  Biofinity® XR Comfilcon A תכולת נוזל: 48% | 8.6 | 14.0 | +8.50 to +15.00 -12.50 to -20.00 | 0.50 | 3 עדשות ₪ 200 |
|  DISPO PLUS Ocufilecon D תכולת נוזל: 55% | 8.6 8.9 | 14.2 | -0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +5.00 +5.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | ₪ 150 |
|  Biomedics® 55 Evolution Ocufilecon D תכולת נוזל: 55% | 8.6 8.9 | 14.2 | -0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +5.00 +5.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | ₪ 150 |
|  Proclear® Monthly Omafilecon B תכולת נוזל: 62% *הזמנת חייל | 8.6 | 14.2 | Plano to -6.00 -6.50 to -20.00 +0.50 to +6.00 +6.50 to +20.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | ₪ 150 |

עדשות מגע חודשיות צבעוניות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | צבעים | מחיר מומלץ |
|---|-------|------|--|----------------------------------|------------|
|  Colors™ Polyhema תכולת נוזל: 43% | 8.6 | 14.2 | -1.00 to -6.00 (0.25 steps) +1.00 to +4.00 (0.50 steps) | Green, Gray, Blue, Pure Hazel | ₪ 110 |

עדשות מגע טוריות - זו שבועיות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | צילינדר | זווית | מחיר מומלץ |
|--|-------|------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
|  Avaira Vitality[®] toric fanfilcon A תכולת נוזל: 55% | 8.5 | 14.5 | +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00 -0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | -0.75 to -2.25 (0.50 steps) | 10° to 180° (10° steps) | 6 עדשות ש 320 |

עדשות מגע טוריות - חודשיות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | צילינדר | זווית | מחיר מומלץ |
|--|-------|------|---|--|--|----------------------------|--|
|  DISPO BIO Toric Comfilcon A תכולת נוזל: 48% | 8.7 | 14.5 | Plano to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00 | 0.25 0.50 0.25 0.50 | -0.75 to -2.25 (0.50 steps) | 10° to 180° (10° steps) | 6 עדשות ש 555 |
|  DISPO PLUS Toric Ocufilecon D תכולת נוזל: 55% | 8.7 | 14.5 | -6.50 to -9.00 +5.00 to -6.00 +5.50 to +6.00 | 0.50 0.25 0.50 | -0.75 to -2.25 (0.50 steps) | 10° to 180° (10° steps) | 6 עדשות ש 460 |
|  Biomedics[®] Toric Ocufilecon D תכולת נוזל: 55% | 8.7 | 14.5 | -6.50 to -9.00 +5.00 to -6.00 +5.50 to +6.00 | 0.50 0.25 0.50 | -0.75 to -2.25 (0.50 steps) | 10° to 180° (10° steps) | 6 עדשות ש 460 |
|  Biofinity[®] XR toric comfilcon A תכולת נוזל: 48% לא תתאפשר החזרת קופסאות | 8.7 | 14.5 | +8.50 to +20.00 -10.50 to -20.00 Plano to -6.00 -6.00 to -20.00 +0.25 to +6.00 +6.00 to +20.00 | 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 | -0.75 to -2.25 (0.50 steps) -2.75 to -5.75 (0.50 steps) | 5° to 180° (5° steps) | 6 עדשות ש 915 3 עדשות ש 515 |



עדשות מגע מולטיפוקל - יומיות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | ADD | מחיר מומלץ |
|--|-------|------|-----------------|-------|--|--|
|  <p>MyDay® multifocal Stenfilcon A תכולת נוזל: 54%</p> | 8.4 | 14.2 | +8.00 to -10.00 | 0.25 | Low +0.75 to +1.25 Med +1.50 to +1.75 High +2.00 to +2.50 | קופסא: 235 ע"ש עסקה שנתית: 175 ע"ש 4,200 ע"ש |
|  <p>Dispo Air Multi 1 Day Somofilcon A תכולת נוזל: 56%</p> | 8.6 | 14.1 | +5.00 to -6.00 | 0.25 | Low up to 2.25 High +2.25 to +2.75 | קופסא: 230 ע"ש עסקה שנתית: 170 ע"ש 4,080 ע"ש |

עדשות מגע מולטיפוקל - חודשיות

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | ADD | מחיר מומלץ |
|---|-------|------|--|--|--|--------------------|
|  <p>Biofinity® multifocal Comfilcon A עיצוב: CN/ CD תכולת נוזל: 48%</p> | 8.6 | 14.0 | +6.00 to -6.00 -6.50 to -10.00 | 0.25 0.50 | +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 | ע"ש 670 |
|  <p>Proclear® multifocal Omafilcon B תכולת נוזל: 60% לא תתאפשר החזרת קופסאות *הזמנת חו"ל</p> | 8.7 | 14.4 | +6.00 to -6.50 -7.00 to -8.00 | 0.25 0.50 | +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 | ע"ש 690 |
|  <p>Proclear® XR multifocal Omafilcon B עיצוב: CN/ CD תכולת נוזל: 62% לא תתאפשר החזרת קופסאות *הזמנת חו"ל</p> | 8.7 | 14.4 | +6.50 to +20.00 -8.50 to -20.00 +20.00 to -20.00 | 0.25 steps 0.50 steps after +/-6.50 | +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50 +4.00 +1.00 to +4.00 (0.50 steps) | 3 עדשות ע"ש 860 |

| שם המוצר / חומר גלם | קימור | קוטר | כוח ספרי | דילוג | צילינדר | ADD | זווית | מחיר מומלץ |
|---|------------|------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  <p>Biofinity® multifocal toric Comfilcon A עיצוב: CN/ CD תכולת נוזל: 48% לא תתאפשר החזרת קופסאות *הזמנת חו"ל</p> | 8.7 | 14.5 | -10.00 to +10.00 | 0.25 steps 0.50 steps after +/-6.50 | -0.75 to -5.75 (0.50 steps) | +1.00 to +2.50 (0.50 steps) | 5° to 180° (5° steps) | ע"ש 450 עדשות |
|  <p>Proclear® multifocal toric Omafilcon B עיצוב: CN/ CD תכולת נוזל: 62% לא תתאפשר החזרת קופסאות *הזמנת חו"ל</p> | 8.4 8.8 | 14.4 | +20.00 to -20.00 | 0.25 steps 0.50 steps after +/-6.50 | -0.75 to -5.75 (0.50 steps) | +1.00 to +4.00 (0.50 steps) | 5° to 180° (5° steps) | ע"ש 860 ניתן להזמין גם כ-3 עדשות |



עדשות מיוחדות



Soflex


עדשות מגע רכות ספריות - תלת חודשיות

| שם המוצר / חומר גלם | תכולת נוזל | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|--|------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| SH SPHERE 11102 Silicone Hydrogel Filcon V3 - Clear | 74.0% | 13.00, 13.50 14.50 , 15.00 | 7.80 to 9.30 in 0.3 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | Avg. K + 0.3 to 0.4 | ₪ 365 |
| Baby lens 11102 Silicone Hydrogel Filcon V3 - Clear | 74.0% | 12.00 to 15.50 in 0.5 mm steps | 6.80 to 8.60 in 0.2 mm steps | -20.00 to +40.00 in 0.25D steps | יש לקבל הנחיות ממחלקת הייעוץ המקצועי | ₪ 285 |

עדשות מגע רכות ספריות - שנתיות

| שם המוצר / חומר גלם | תכולת נוזל | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|---|------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| EXPO 1196 Filcon II 2 - Blue tint | 59.0% | 14.00 | 7.60, 7.90, 8.20 8.50, 8.80 | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | Avg. K + 0.4 to 0.5 | ₪ 400 |
| CDGM3 11129 Filcon II 2 - Blue tint | 59.0% | 13.00 13.50 14.50 15.00 | 7.60 to 9.00 in 0.2 mm steps | -20.00 to +40.00 in 0.25D steps | Avg. K + 0.5 to 0.6 | ₪ 465 |
| CD78 11164 Filcon II 3 - clear | 77.0% | 12.50 to 18.00 in 0.5 mm steps | 6.80 to 9.00 in 0.2 mm steps | Plano -30.00 to +30.00 in 0.25D steps | Avg. K + 0.3 to 0.4 (לקוטר 14.50) | ₪ 480 |

עדשות מגע רכות וגמישות ניתן לקבל גם בפרמטרים שונים מהרשום. להזמנות יש לפנות למחלקת הייעוץ המקצועי.

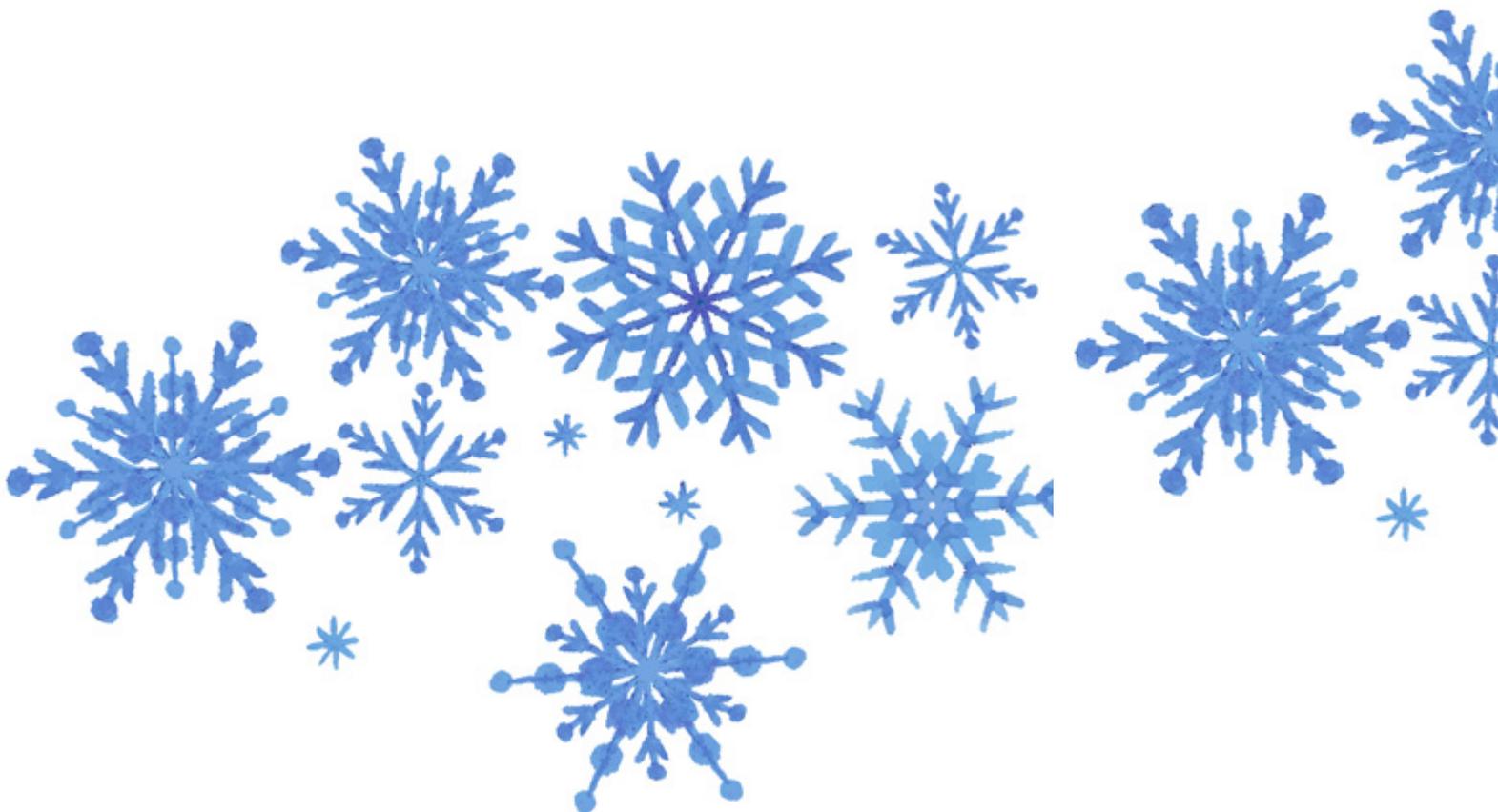

עדשות מגע רכות טוריות - תלת חודשיות

| שם המוצר / חומר גלם | תכולת נוזל | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|--|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------|
| SH TORIC 11169 Silicone Hydrogel Filcon V3 - Clear | 74.0% | 13.50 14.50, 15.00 | 7.80 to 9.30 in 0.3 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | Cyl up to -15.00 in 0.25D steps at any axis | ₪ 535 |
| SH SPHERE FT 11169 Front Toric Silicone Hydrogel Filcon V3 - Clear | 74.0% | 13.50 14.50, 15.00 | 7.80 to 9.30 in 0.3 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | -0.25 to -4.50 in 0.25D steps at any axis | ₪ 535 |
| TRIOS 11135 Filcon II 2 - Clear | 59.0% | 14.50 | 8.40, 8.70 9.00 | +6.00 to -10.00 in 0.25D steps | -0.75 to -5.25 in 0.25D steps 5° to 180° at 5° steps | ₪ 365 |

עדשות מגע רכות טוריות - שנתיות

| שם המוצר / חומר גלם | תכולת נוזל | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|---|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| TORIC LITE 11258 Filcon II 2 - Blue tint | 59.0% | 13.50 14.50, 15.00 | 8.10 to 9.60 in 0.3 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | Cyl up to -15.00 in 0.25D steps at any axis | ₪ 850 |
| CDGM3 FT 11258 Front Toric Filcon II 2 - Blue tint | 59.0% | 13.50 14.50, 15.00 | 7.60 to 9.00 in 0.2 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | -0.25 to -4.50 in 0.25D steps at any axis | ₪ 850 |

הוראות התאמה לעדשות מגע טוריות

בהתאמה של עדשת מגע BACK TORIC יש לוודא כי הצילינדר בחבו קורניאלי. לעזרה בבחירת נתוני העדשה המתאימה, ניתן לפנות למחלקת היעוץ המקצועי.

| | SH TORIC Back Toric | TORIC LITE®/TRIOS Back Toric | SH SPHERE FT Front Toric | CDGM3 FT Front Toric |
|--------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| סימון | פס אחד בשעה 6:00 | פס אחד בשעה 6:00 | פס אחד בשעה 6:00 | פס אחד בשעה 6:00 |
| בחירה ראשונה | K.flat + 0.5 to 0.7 mm | K.flat + 0.8 to 1.0 mm | K.Avg + 0.3 to 0.4 mm | K.Avg + 0.5 to 0.6 mm |
| תנועה | כ- 1.0 מ"מ | כ- 1.0 מ"מ | כ- 1.0 מ"מ | כ- 1.0 מ"מ |
| יצוב | עד 10.00 ± | עד 10.00 ± | עד 10.00 ± | עד 10.00 ± |
| חישוב הזווית | L.A.R.S. | L.A.R.S. | L.A.R.S. | L.A.R.S. |

* יש לחשב B.V.C לעוצמת הספר והצילינדר



עדשות מגע מולטיפוקל תלת חודשיות

| שם המוצר / חומר גלם | תכולת נוזל | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|--|------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|
| SH EYE-Q® 11225 Silicone Hydrogel Filcon V3 - Clear | 74.0% | 14.50 15.00 | 8.10 to 9.60 in 0.3 mm steps | +10.00 to -20.00 in 0.25D steps | Med Add Up to +2.25DS High Add Up to +2.75DS Center near | ₪ 620 |
| SH TORIC EYE-Q® 11259 Silicone Hydrogel Filcon V3 - Clear | 74.0% | 14.50 15.00 | 8.10 to 9.60 in 0.3 mm steps | +10.00 to -20.00 in 0.25D steps Cyl up to -6.00 in 0.25D steps at any axis | Med Add Up to +2.25DS High Add Up to +2.75DS Center near | ₪ 810 |
| MiOpia 11225 Silicone Hydrogel Filcon V3 - Clear | 74.0% | 13.50-15.00 in 0.5mm steps | 7.20 to 8.80 in 0.2mm steps | +15.00 to -20.00 in 0.25D steps | Add up to +4.00D in 0.25D steps Center distance | ₪ 620 |
| MiOpia Toric 11259 Silicone Hydrogel Filcon V3 - Clear | 74.0% | 13.50-15.00 in 0.5mm steps | 7.50 to 9.30 in 0.3mm steps | +10.00 to -20.00 in 0.25D steps Cyl up to -6.00 in 0.25D steps | Add up to +4.00D in 0.25D steps Center distance | ₪ 810 |

עדשות מגע מולטיפוקל שנתיות

| שם המוצר / חומר גלם | תכולת נוזל | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|--|------------|-------------------------|---------------------------------|---|--|------------|
| EYE-Q® 11281 Filcon II 2 - Blue tint | 59.0% | 14.50 15.00 | 8.30 8.60 8.90 | +10.00 to -20.00 in 0.25D steps | Med Add Up to +2.25DS High Add Up to +2.75DS Center near | ₪ 1,585 |
| EYE-Q® Toric 11332 Filcon II 2 - Blue tint | 59.0% | 14.50 15.00 | 8.10 to 9.60 in 0.3 mm steps | +10.00 to -20.00 in 0.25D steps Cyl up to -6.00 in 0.25D steps at any axis | Med Add Up to +2.25DS High Add Up to +2.75DS Center near | ₪ 1,755 |
| MiOpia Hy 11281 Filcon II 2 - Blue tint | 59.0% | 13.50 14.50 15.00 | 7.20 to 8.80 in 0.2 mm steps | +15.00 to -20.00 in 0.25D steps | Add up to +4.00D in 0.25D steps Center distance | ₪ 1,755 |
| MiOpia T Hy 11326 Filcon II 2 - Blue tint | 59.0% | 13.50 14.50 15.00 | 7.50 to 9.30 in 0.3 mm steps | +15.00 to -20.00 in 0.25D steps Cyl up to -6.00 in 0.25D steps | Add up to +4.00D in 0.25D steps Center distance | ₪ 1,755 |

עדשות מגע מולטיפוקל גמישות נישמות

| שם המוצר | גאומטריה | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | תוספת לקריאה | מחיר מומלץ |
|---|-----------------|---|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| SENSO SELECT ZOOM 11506 *הזמנת חו"ל | Center Distance | 9.30 to 10.80 in 0.30mm steps Standard - 9.90 | 7.10 to 8.50 0.05mm | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | +1.00 to +3.00 @ 0.25DS steps | ₪ 1,975 |
| SENSO SELECT DUO 11618 *הזמנת חו"ל | Segment | 9.30 to 10.80 in 0.30mm steps Standard - 9.90 | 7.10 to 8.50 0.05mm | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | +1.00 to +3.00 @ 0.25DS steps | ₪ 2,105 |

טבלה לבחירת בסיס בעדשות מולטיפוקל רכות

| | |
|----------------|----------------------|
| SH EYE Q TORIC | K Flat +0.5 to 0.7mm |
| EYE Q | Avg k +0.5 to 0.6mm |
| EYE Q TORIC | K flat +0.8 to 1.0mm |

עדשות מגע גמישות נוסמות (GP)

| שם המוצר | גאומטריה | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------|
| SOFLEX ND 11157 | Aspheric Design Polish Free | 9.60 10.20 | 7.00 to 8.50 | +20.00 to -20.00 in 0.25D steps | k flat ± 0.05 | ₪ 735 |
| SKI 11157 | Spheric OZ + Tangential Periphery Design | 9.00, 9.50 10.00 | 7.10 to 8.50 | +20.00 to -20.00 in 0.25D steps | k flat ± 0.05 | ₪ 735 |
| OP2 11157 | Spheric Design (ECC = 0.2) | 9.30 9.80 | 7.00 to 8.50 | +20.00 to -20.00 in 0.25D steps | k flat ± 0.15 | ₪ 735 |
| OP5 11157 | Aspheric Design (ECC = 0.5) | 9.30 9.80 | 7.00 to 8.50 | +20.00 to -20.00 in 0.25D steps | k flat ± 0.05 | ₪ 735 |
| SPECIAL HARD 11157 | 2 to 8 curves | 8.00 to 11.00 | 6.80 to 8.50 | +20.00 to -20.00 in 0.25D steps | Special Design | ₪ 735 |

לעדשות בקבוצה זו ניתן להוסיף צילינדר בחזית העדשה (Front Toric) של עד ל-4.50D ובכל זווית | קוד: 11250

עדשות מגע טוריות גמישות נוסמות (GP)

| שם המוצר וסוג חומר | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | עוצמת הצילינדר זווית | מחיר מומלץ |
|---|---------------|--------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| OPT 11258 ראה טבלת חומרי גלם למטה | 9.00 to 10.50 | 7.30 to 8.50 | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | Any | ₪ 900 |
| OPT PERIPHERY 11258 ראה טבלת חומרי גלם למטה | 9.00 to 10.50 | 7.30 to 8.50 | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps | Any | ₪ 845 |

לעדשות בקבוצה זו ניתן להוסיף צילינדר בחזית העדשה (Front Toric) של עד ל-4.50D ובכל זווית

טבלת חומר גלם לעדשות מגע גמישות נוסמות

| שם המוצר | שימוש | חדירות חמצן | צבע | USAN Name |
|------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Contamac | | | | |
| OPTIMUM EXTREME | Flexible Wear | 125 ⁽²⁾ | Blue (UV), Green (UV) | Roflufocon E |
| OPTIMUM EXTRA | Flexible Wear | 100 ⁽²⁾ | Blue, Grey, Green | Roflufocon D |
| OPTIMUM COMFORT | Flexible Wear | 65 ⁽²⁾ | Blue (UV), Green (UV), Green, Grey | Roflufocon C |
| Paragon | | | | |
| HDS® 100 | Flexible Wear | 100 ⁽³⁾ | Blue, Green | Pafufocon D |
| HDS® | Flexible Wear | 58 ⁽¹⁾ | Blue, Green | Pafufocon B |
| FLUOROPERM 30 | Daily Wear | 30 ⁽¹⁾ | Blue, Green, Grey, Clear | Pafufocon C |
| Boston | | | | |
| BOSTON XO2 | Flexible Wear | 141 ⁽²⁾ | Blue (UV), Green (UV) | Hexafocon B |
| BOSTON XO | Flexible Wear | 100 ⁽²⁾ | Ice Blue (UV), Violet (UV) | Hexafocon A |

1. Revised Fatt Method 2. ISO/Fatt Method 3. ISO/ANSI Method

עדשות מגע לקרטוקונוס ולקרניות אי-רגולריות

Silicone Hydrogel - תלת חודשיות

| שם המוצר / חומר גלם | תכולת נוזל | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|--|------------|----------------|--|---|---|------------|
| 11225, 11259 SH Soft K II Sphere/ Front Toric Filcon V3 - Clear | 74.0% | 14.20 14.80 | 7.00 to 8.20 in 0.3 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps Cyl up to -4.50 at any axis | Use Trial Lenses (start with B.C 7.90) | ₪ 675 |
| 11259 SH SOFT K TORIC Back Toric Filcon V3 - Clear | 74.0% | 14.20 14.80 | 7.00 to 8.20 in 0.3 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps Cyl up to -7.00 at any axis | Use Trial Lenses (start with B.C 7.90) | ₪ 675 |
| 11280, 11418 SH Semi Scleral Soft K Sphere/Front Toric Filcon V3 - Clear | 74.0% | 17.00 | 6.40 to 7.60 in 0.3 mm steps Periphery: Steep, Regular | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps Cyl up to -4.50 at any axis | Use Trial Lenses (start with B.C 7.30) | ₪ 900 |

Hydrogel - שנתיות


| שם המוצר / חומר גלם | תכולת נוזל | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|--|------------|----------------|---------------------------------|---|---|------------|
| 11418 Soft K II 67 Sphere/ Front Toric Filcon II 2 - Clear | 67.0% | 14.20 14.80 | 7.00 to 8.20 in 0.3 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps Cyl up to -4.50 at any axis | Use Trial Lenses | ₪ 2,020 |
| 11485 Soft K67 Toric Back Toric Filcon II 2 - Clear | 67.0% | 14.20 14.80 | 7.00 to 8.20 in 0.3 mm steps | -20.00 to +20.00 in 0.25D steps Cyl up to -7.00 at any axis | Use Trial Lenses (start with B.C 7.90) | ₪ 2,020 |

משפחת **SOFT K** (14.20, 14.80)

עדשה מגע המיוצרת מחומר גלם בעל תכולת נוזל גבוהה לה מבנה מיוחד, אשר מאפשר תיקון ראייה במקרים רבים כמו לקרטוקונוס, קרניות מעוותות וקרניות לאחור ניתוחי רפרקציה.

התאמת עדשה אמפירית

- מתחילים עם בסיס 7.90. יש להקפיד על תנועה תקינה, ישיבה מרכזית, איכות ראייה תקינה והעדר בועות אוויר מתחת לעדשה.
 - ניתן לשנות את בסיס העדשה במידת הצורך.
 - לאחר כשעה יש לבצע over refraction ועל פי ממצאים אלו מחליטים על העדשה הסופית שיש להזמין.
- הטיפול בעדשה מומלץ השימוש במערכת ניקוי וחיטוי המבוססת על מי חמצן.

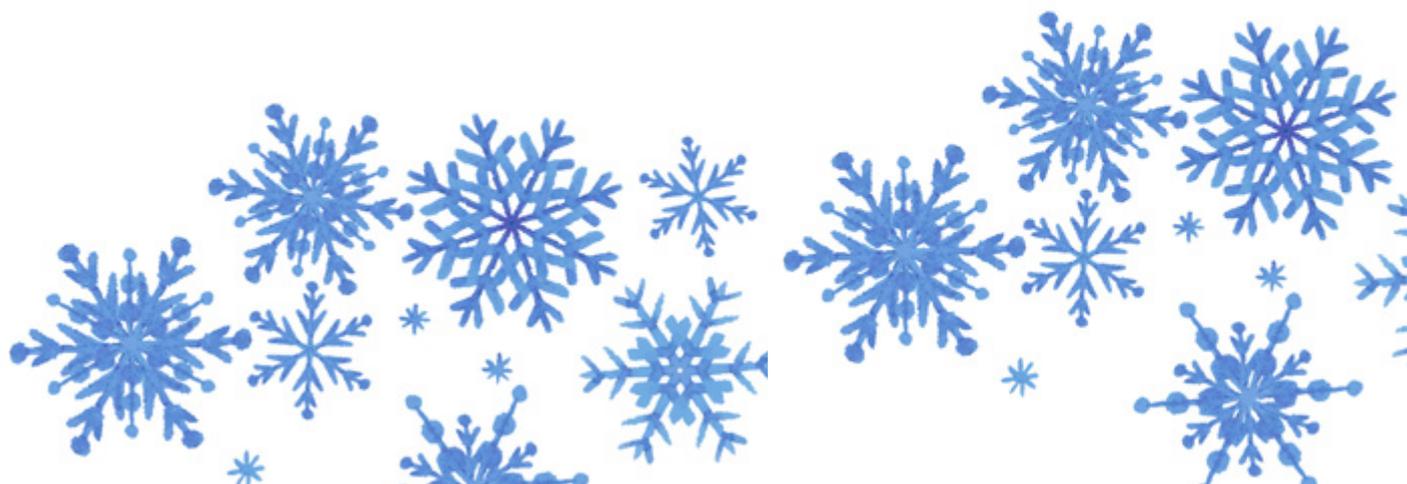


סמי סקלרליות

| שם המוצר | גאומטריה | קוטר | SAG | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------|
| ONEFIT 11843,111011 | Spheric + Toric | 14.60, 14.90 , 15.20 | BC 6.0 to 9.4mm | -20.00 to +20.00 CYL -0.50 | Use Trial Lenses | ₪ 5,505 |
| ONEFIT MED 111011 | Spheric + Toric | 15.6 , 16.00 16.40 | 3800 to 6600 | -25.00 to +30.00 CYL -0.50 to -10.00 at any axis | Use Med Trial Lenses | ₪ 5,505 |
| ICD Flex Fit 16.3 111011 | Spheric + Toric | 15.50 17.00 | 3600 to 5400 | -40.00 to +30.00 in 0.25D steps Cyl up to -10.00 at any axis | Use Trial Lenses | ₪ 5,505 |
| ICD Flex Fit 14.8 111011 | Spheric | 14.50 15.50 | 2800 to 4400 | -40.00 to +30.00 in 0.25D steps | Use Trial Lenses | ₪ 5,505 |
| ROSE K2 XL 111011 *הזמנת חו"ל | ---- | 14.60 13.60 to 16.00 | Base curve 5.60 to 8.40 | Any | Use Trial Lenses | ₪ 5,505 |

גמישות נשמות

| שם המוצר | גאומטריה | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|--|----------------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------------|------------|
| OP8 11202 Keratoconus | High Aspheric Design | 8.50 to 10.20 | 5.80 to 7.60 | +20.00 to -20.00 in 0.25D steps | Use Trial Lenses | ₪ 1,070 |
| ROSE K2 11404 Keratoconus *הזמנת חו"ל | Dynamic O.Z | 7.90 to 10.40 | 4.30 to 8.60 | Any | Use Trial Lenses | ₪ 1,460 |
| ROSE K2 IC 11449 Irregular Cornea *הזמנת חו"ל | Reverse Geometry | 9.40 to 12.00 | 5.70 to 9.30 | Any | Use Trial Lenses | ₪ 1,685 |
| ROSE K2 PG 11416 Post Graft *הזמנת חו"ל | Reverse Geometry | 9.40 to 12.00 | 5.70 to 9.30 | Any | Use Trial Lenses | ₪ 1,575 |

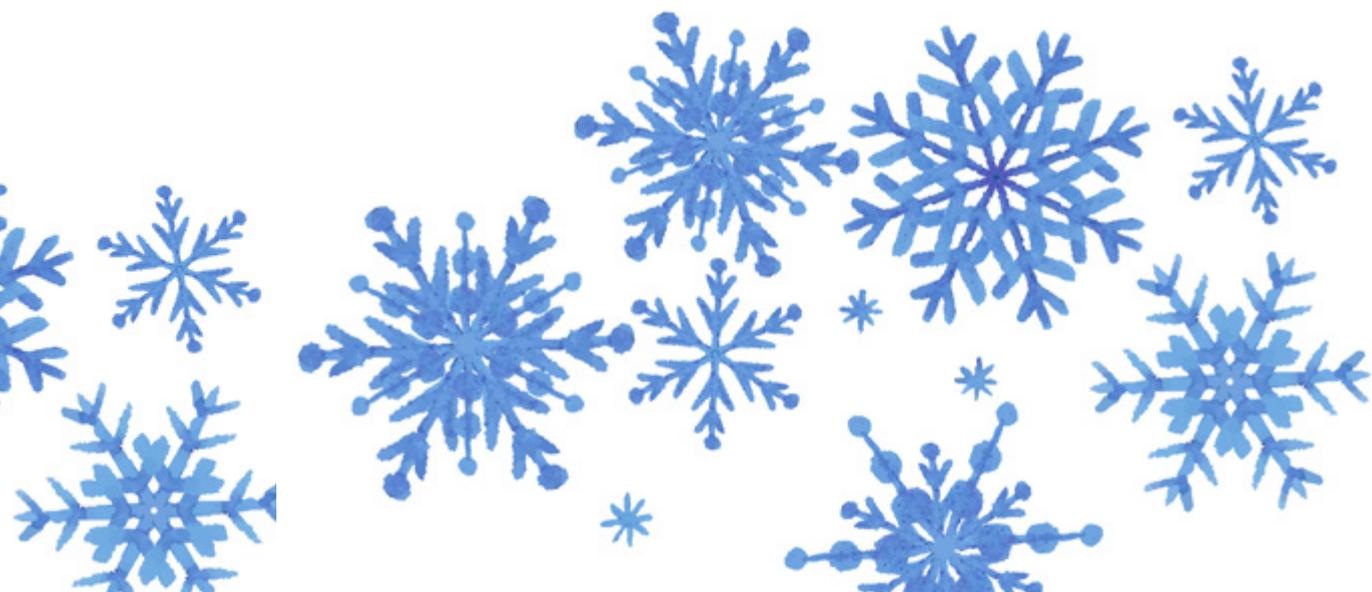

עדשות מגע היברידיות Synergeyes - חצי שנתיות

| שם המוצר וסוג חומר | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|---|-------|---|---|------------------|------------|
| Ultra Health 11472 For Keratoconus & Irregular Cornea Petrafocon A (Center) LensesHem LorafilconA 32% (Skirt). UVA+UVB | 14.50 | SAG 50 to 550 in 50µ Steps Soft Skirt Steep, Medium Flat, Flat 2 | +2.00 to -8.00 in 0.25D steps -8.50 to -20.00 in 0.50D steps +2.50 to +10.00 in 0.50D steps | Use Trial Lenses | ₪ 1,520 |
| Duette HD 11472 For high astigmatism Petrafocon A (Center) LensesHem LorafilconA 32% (Skirt). UVA+UVB | 14.50 | 7.10 to 8.30 at 0.20mm steps Soft Skirt Medium, Flat, Flat 2 | +8.00 to -8.00 in 0.25D steps -8.50 to -15.00 in 0.50D steps +8.50 to +10.00 in 0.50D steps | Use Trial Lenses | ₪ 1,520 |

עדשות מגע ל Orthokeratology

| שם המוצר וסוג חומר | קוטר | בסיסים | תחום עוצמה | הוראות התאמה | מחיר מומלץ |
|--|-------------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|
| CRT 11449 HDS 100 | 10.50 | 7.80 to 9.20 | +0.50 | יש לקבל הוראות ממחלקת היעוץ המקצועי | ₪ 2,225 |
| CRT Dual Axis 11551 HDS 100 | 10.50 | 7.80 to 9.20 | +0.50 | יש לקבל הוראות ממחלקת היעוץ המקצועי | ₪ 2,340 |
| SOFLEX OVERNIGHT / ORTHOTOOL 11444 Boston XO, Optimum Extra Row material ≥DK 100 | 10.30-11.20 | 7.60 to 9.60 | +1.00 | יש לקבל הוראות ממחלקת היעוץ המקצועי | ₪ 2,225 |

בחירת המטופל המתאים


- בעל מרשם: ספר -0.75 ועד -6.00 דיופטר, צילינדר עד -1.50 דיופטר (wtr) ועד -0.75 דיופטר (atr)
- הצילינדר קורניאלי
- מצב פיזיולוגי תקין של העין
- כמות דמעות תקינה
- לא משתמש בתרופות
- מעל גיל שמונה
- בעל מוטיבציה
- בעל סדר יום מסודר
- התהליך מחייב מעקב באמצעות מיפוי קרנית

מחירון טרייל סטים

להלן מחירון עבור ערכות ניסיון לעבודה עם עדשות מיוחדות.

| מחיר | מספר עדשות בסט | |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| ₪ 3,370 | 20 | ONEFIT MED |
| ₪ 1,010 | 11 | OP8 |
| ₪ 1,010 | 26 | ROSE K2 |
| ₪ 1,010 | 14 | ROSE K IC |
| ₪ 1,010 | 24 | ROSE K PG |
| ₪ 14,120 | 100 | NEW CRT DDS |
| ₪ 1,575 | 18 - קיים בשני פרופילים. | SENSO SELECT ZOOM |
| ₪ 790 | 9 | SOFT K II (שני קטרים) |
| ₪ 900 | 9 | SOFT K SEMI SCLERAL (קוטר 17 מ"מ) |
| ₪ 1,070 | 11 | SKI |
| ₪ 1,070 | 11 | SOFLEX ND |
| ₪ 3,850 | 26 | ULTRAHEALTH |
| ₪ 3,210 | 18 | DUETTE HD |

■ המחירים לא כוללים מע"מ
■ השלמת עדשות טרייל סט - 50% ממחיר מחירון העדשה (לא כולל סטים מחוי"ל)

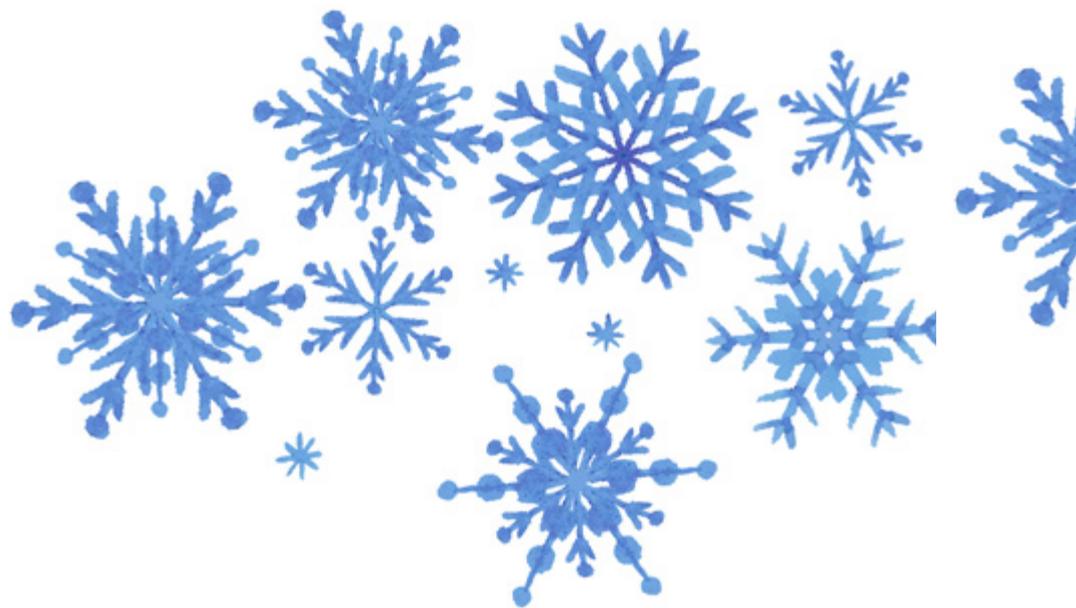

תמיסות וסבון לניקוי וטיפול בעדשות

AVIZOR lipid clean

תכולה: 60ml



סבון לניקוי יומי לטיפול בעדשות מגע רכות ועדשות סיליקון הידרוג'ל

מחיר לצרכן

₪90

EVER CLEAN PLUS



תמיסה חד שלבית מתקדמת לניקוי, חיטוי והסרת משקעים מעדשות מגע בשיטת מי חמצן 3%.

מחיר לצרכן

350ml + 45 tablets - ₪125
2X 350ml + 90 tablets - ₪225

AVIZOR GP multi

תכולה: 240ml



תמיסה לשטיפה, ניקוי והשרייה לעדשות גמישות נושמות

מחיר לצרכן

₪110

Alvera

תכולה: 350ml



תמיסה רב תכליתית המכילה אלווורה לכל סוגי עדשות המגע הרכות. תוכננה במיוחד עבור עדשות מסיליקון הידרוג'ל.

מחיר לצרכן

₪90

AVIZOR GP 1 cleaner

תכולה: 30ml



סבון לניקוי עדשות גמישות נושמות

מחיר לצרכן

₪80

Unica

תכולה: 350ml



תמיסה רב-תכליתית המכילה חומצה היאלורונית לשיפור הנוחות לכל סוגי עדשות המגע הרכות.

מחיר לצרכן

₪70

AVIZOR GP 2 conditioner

תכולה: 120ml



תמיסה לשטיפה והשרייה לעדשות גמישות נושמות

מחיר לצרכן

₪80

Dispo


תכולה: 350ml



תמיסה רב-תכליתית המכילה מסיר חלבונים לכל סוגי עדשות המגע הרכות.

מחיר לצרכן

₪60

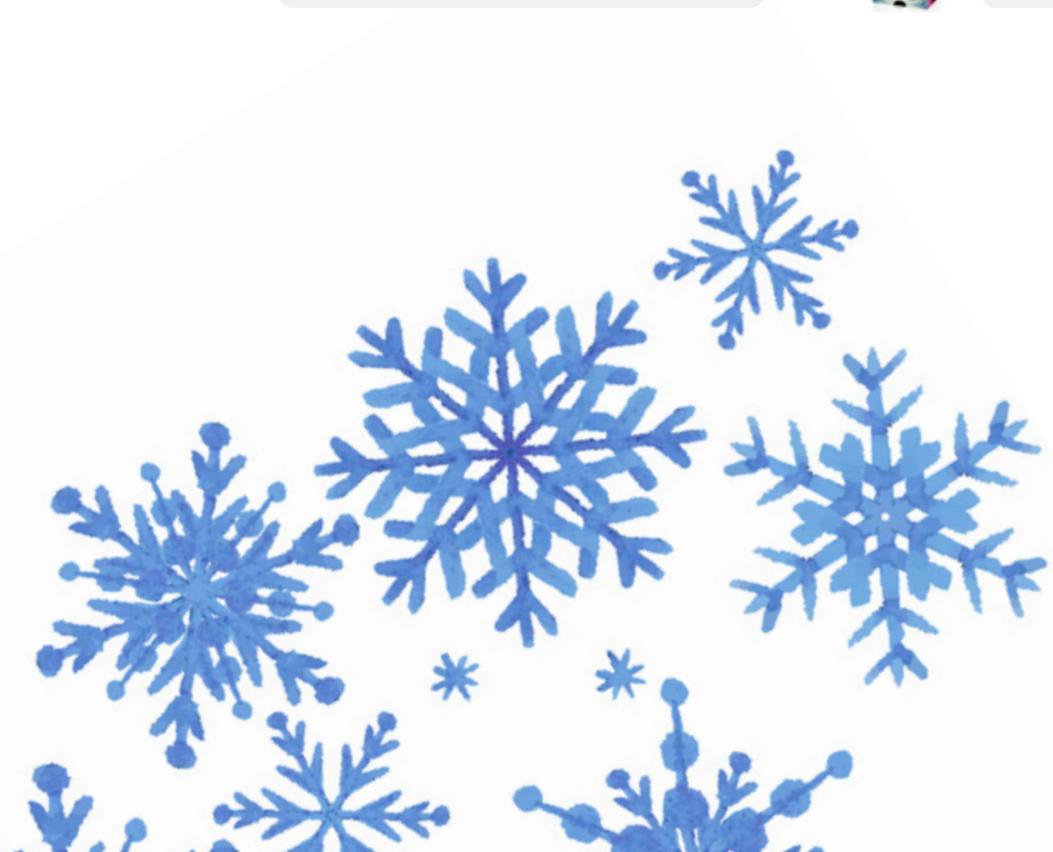

תמיסות וסבון לניקוי וטיפול בעדשות

AVIZOR LACRIFRESH
moisture drops (lacrifresh)

תכולה: 15ml



טיפות הרטבה לכל סוגי עדשות המגע

מחיר לצרכן
₪75

AVIZOR LACRIFRESH
comfort drops (lacrifresh)

תכולה: 15ml



טיפות הרטבה להגברת הנוחות

מחיר לצרכן
₪75

AVIZOR LACRIFRESH
cleaning drops (lacrifresh)

תכולה: 15ml



תמיסת ניקוי והרטבה לכל סוגי עדשות המגע

מחיר לצרכן
₪75

AVIZOR saline unidose

תכולה: 30x5ml



אמפולות תמיסת סליין ללא חומר משמר

מחיר לצרכן
₪100

Saline

תכולה: 350/500ml



תמיסת סליין סטרילית לשימוש עם כל סוגי עדשות המגע.

מחיר לצרכן
₪50 : 350ml | ₪60 : 500ml

Bepanthen

תכולה: 20 אמפולות / בקבוקון 10ml



טיפות עיניים ללא חומר משמר עם האפקט המשולב המעניק לחות וסיכור לאורך זמן ומטפל בעיניים יבשות. מתאים גם למרכיבי עדשות מגע. מכיל חומצה היאלורונית.

מחיר לצרכן
אמפולות: ₪85 | בקבוקון: ₪105

מחסניות



מגוון מחסניות לעדשות רכות / קשות / סקלרליות

פומפות



מגוון פומפות להכנסה ולהוצאה של עדשות

BIOGLO FLUORESCEIN

תכולה: 100 strips



לבדיקת התאמת עדשות מגע גמישות נושמות ובדיקות נוספות של העין

TEARFLOW SCHIRMER

תכולה: 250ml




לבדיקת איכות הדמעות וכמותן

U-VIEW LAMP




מנורת בדיקה עם אור כחול

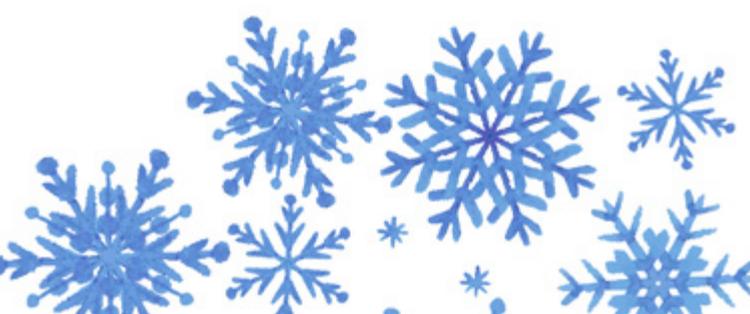



מדריכי התאמה,
מחשבוניים וכלי עזר
לאבחון קל ונוח (:

מכירים את יישומון OptiExpert™? כדאי לכם!
היישומון הקטן הזה מכיל עולם ומלואו.
כל הכלים לאיבחון קל ומהיר נמצאים ממש אצלכם בכף היד.

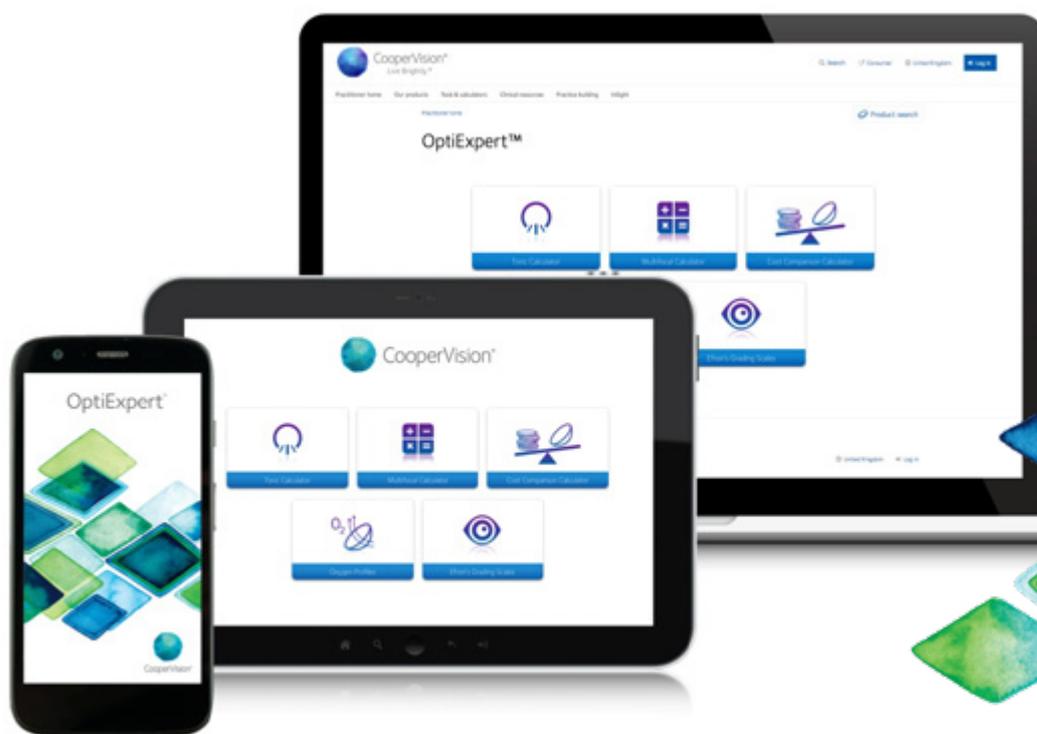

מה יש לנו כאן?

- מחשבון עדשות טוריות Vertex & Lars.
- מחשבון עדשות מולטיפוקל.
- Efron Grading Scale - אבחון מממצאים קליניים מבדיקה של משטח העין במנורת סדק (סליט למפ) כגון: ניאוווסקולרציה, אודם בלחמית ועוד

אז קדימה, תורידו, תכירו ותהנו.

ניתן להורדה בחינם מחנות האפליקציות
סיסמא ראשונית לכניסה: biofinity



מדריך התאמה לעדשות מולטיפוקל

על מנת לבצע התאמה קלה ומוצלחת הכנו עבורכם מדריך פשוט הכולל 3 שלבים להתאמת עדשות מגע מולטיפוקל.
1. קביעת מרשם ובחירת עין דומיננטית **2.** בחירת העדשה המתאימה ביותר **3.** הערכת ההתאמה ושיפורים

שלב ראשון – קביעת העין הדומיננטית והמרשם הספרי

עין דומיננטית:

קביעת עין דומיננטית היא קריטית על מנת להתאים עדשות מגע למטופלים פרסביופים. אנחנו ממליצים להשתמש בשיטת הטשטוש שנותנת תוצאות טובות.

השיטה:

- מתחילים עם מרשם המשקפיים העדכני במסגרת הבדיקה.
- משאירים את שתי העיניים פקוחות ומטשטשים לסירוגין כל עין בעדשת +1.00
- העין הדומיננטית היא העין לה הטשטוש הכי הפריע.

המרשם הספרי:

קובעים מרשם ספרי (Best Sphere) לפציינט ומוודאים חישוב ורטקס (BVC) נכון במידת הצורך. ניתן להיעזר באפליקציית OptiExpert™.

טיפ חשוב: קביעת עין דומיננטית תתבצע תמיד לפני בחירת עדשה ספרית או טורית.

שלב שני – בחירת העדשות המתאימות ביותר

עדשות מגע יומיות

MyDay® multifocal העתיד כבר כאן.

עדשות מגע יומיות מולטיפוקליות מחומר הסיליקון הידרוג'ל הרך ביותר שלנו. מאפשרות 100% חמצן לקרנית, חדות ראייה מעולה, התאמה קלה והסתגלות מהירה.



clariti® 1 day multifocal (Dispo Air Multi 1 day)

עדשות מגע יומיות מהדור השלישי של הסיליקון הידרוג'ל, שומרות על בריאות העין ועל נוחות ההרכבה ומספקות ראייה מצויינת לכל מרחק.



עדשות מגע חודשיות

clariti® multifocal (Dispo Air Multi)

עדשות מגע יומיות מהדור השלישי של הסיליקון הידרוג'ל, שומרות על בריאות העין ועל נוחות ההרכבה ומספקות ראייה מצויינת לכל מרחק.



Biofinity® multifocal

הדור השלישי של עדשות מגע מסיליקון הידרוג'ל משלבות חומרי גלם ואלמנטים עיצוביים על מנת להציע נוחות הרכבה וראיה ברורה לכל מרחק.



Proclear® multifocal and Proclear® multifocal toric

עדשות מגע חודשיות מהידרוג'ל עם PC Technology® כדי לסייע במקרים של יובש הקשור בעדשות מגע. זמינות בטווח פרמטרים רחב (Extra Range).



הוראות התאמה

MyDay® multifocal עדשות יומיות

#1

| INITIAL CONTACT LENS SELECTION | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| Spectacle Rx Add | Dominant Eye | Non-Dominant Eye |
| +0.75D to +1.25D | LOW | LOW |
| +1.50D to +1.75D | LOW | MED |
| +2.00D to +2.50D | LOW | HIGH |

בחירה ראשונית של עדשות לנסיין:
עבור העין הדומיננטית, בוחרים את המרשם המתאים לרחוק, בהתבסס על תוצאות המרשם הספרי מהשלב הראשון ונותנים ADD לקריאה LOW.

עבור העין הלא דומיננטית, בוחרים את המרשם הרלוונטי בהתבסס על המרשם הספרי מהשלב הראשון. ונותנים ADD לקריאה ע"פ טבלה מס' 1:

#2

| DISTANCE VISION ENHANCEMENT | |
|---|------------------|
|  | For Dominant Eye |
| Adjustment Steps | ±0.25D |

| NEAR VISION ENHANCEMENT | |
|---|----------------------|
|  | For Non-Dominant Eye |
| Adjustment Steps | ±0.25D |

אופטימיזציה למרשם העדשה

יש להשאיר את שתי עיני הפציינט פקוחות ולהשתמש בפליפר או להחזיק עדשות ולשים מול העין. אין להשתמש בפורופטר.
אין לשנות את עוצמת ה-ADD
 יש לשפר את הראיה לרחוק/קרוב לפי טבלה מס' 2:

Worked example – Myope:

| | Sphere | Cyl | Axis | ADD | Ocular dominance | Best sphere | Initial MyDay® multifocal trial lens |
|----|--------|-------|------|-------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| RE | -3.00D | -0.50 | 180 | +1.50 | Non-dominant | -3.25D | -3.25 MED |
| LE | -2.75D | -0.50 | 170 | +1.50 | Dominant | -3.00D | -3.00 LOW |

Worked example – Hyperope:

| | Sphere | Cyl | Axis | ADD | Ocular dominance | Best sphere | Initial MyDay® multifocal trial lens |
|----|--------|-------|------|-------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| RE | +1.75D | -0.50 | 180 | +2.00 | Dominant | +1.50D | +1.50LOW |
| LE | +2.25D | | | +2.00 | Non-dominant | +2.25D | +2.25HIGH |

הוראות התאמה

עדשות חודשיות ויומיות Clariti multifocal / Dispo Air Multi

מתחילים עם המרשם הספרי שהתקבל בשלב הראשון, ומשתמשים בטבלת ההתאמה של עדשות המגע clariti® multifocal שמופיעה פה כדי לבחור את עדשות הניסיון הראשונות:

| ADD | Dominant eye | | Non-dominant eye | |
|----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| | Myope emmetrope | Hyperope | Myope emmetrope | Hyperope |
| +0.75 to +1.75 | BS LOW | BS LOW | BS LOW | BS +0.25 LOW |
| +2.00 to +2.25 | BS LOW | BS +0.25 LOW | BS +0.50 LOW | BS +0.50 LOW |
| >+2.25 | BS +0.25 LOW | BS +0.25 LOW | BS +0.25 HIGH | BS +0.25 HIGH |

BS= Best sphere

Worked example – Myope:

| | Sphere | Cyl | Axis | ADD | Ocular dominance | Best sphere | Initial clariti® multifocal trial lenses |
|----|--------|-------|------|-------|------------------|-------------|--|
| RE | -3.00D | -0.75 | 180 | +1.25 | Non-dominant | -3.25 | -3.25 LOW |
| LE | -2.75D | -0.25 | 170 | +1.25 | Dominant | -2.75 | -2.75 LOW |

Worked example – Hyperope:

| | Sphere | Cyl | Axis | ADD | Ocular dominance | Best sphere | Initial clariti® multifocal trial lenses |
|----|--------|-------|------|-------|------------------|-------------|--|
| RE | +1.75D | -0.50 | 180 | +2.00 | Dominant | +1.50 | +1.75 LOW |
| LE | +2.25D | | | +2.00 | Non-dominant | +2.25 | +2.75 LOW |

עדשות חודשיות Biofinity / Proclear multifocal

עבור העין הדומיננטית, בוחרים את המרשם המתאים לרחוק, בהתבסס על תוצאות המרשם הספרי מהשלב הראשון ונותנים ADD לקריאה עם עיצוב CENTER DISTANCE. עבור העין הלא דומיננטית, בוחרים את המרשם הרלוונטי בהתבסס על המרשם הספרי מהשלב הראשון. את עיצוב העדשות (Centre Near / Centre Distance) בוחרים בהתייחס ל-ADD הנדרש לקריאה על פי הטבלה.

| ADD* | Dominant eye | Non-dominant eye |
|-------|--------------|------------------|
| +1.00 | D | D |
| +1.50 | D | D |
| +2.00 | D | N |
| +2.50 | D | N |

*Always round down to the nearest available ADD. D refers to a centre-distance design. N refers to a centre-near design.

Worked example – Myope:

| | Sphere | Cyl | Axis | ADD | Ocular dominance | Best sphere | Biofinity® and Proclear® multifocal trial lenses |
|----|--------|-------|------|-------|------------------|-------------|--|
| RE | -3.00D | -0.75 | 180 | +1.25 | Non-dominant | -3.25 | -3.25/+1.00 CD |
| LE | -2.75D | -0.25 | 170 | +1.25 | Dominant | -2.75 | -2.75/+1.00 CD |

Worked example – Hyperope:

| | Sphere | Cyl | Axis | ADD | Ocular dominance | Best sphere | Biofinity® and Proclear® multifocal trial lenses |
|----|--------|-------|------|-------|------------------|-------------|--|
| RE | +1.75D | -0.50 | 180 | +2.00 | Dominant | +1.50 | +1.50/+2.00 CD |
| LE | +2.25D | | | +2.00 | Non-dominant | +2.25 | +2.25/+2.00 CN |

שלב שלישי - הערכת ההתאמה ותיקון

בשלב זה בוחנים את הראיה הפונקציונאלית של המטופל בתנאי "העולם האמיתי" בראיה דו עינית. נותנים למטופל לדרג את הראיה שלו בצורה סובייקטיבית (בסולם של 1-10) במטרות שונות ובמרחקים שונים המתאימים לאורח החיים שלו (לדוגמא - תמרורים, שלטי רחוב, קריאת SMS וכו').

טיפ חשוב: מרכז העדשה הינו קריטי להתאמה תקינה. לשם כך יש לנו סוגים שונים של עדשות מולטיפוקל.

הערכה

- מאפשרים לעדשות המגע להתמקם כ-10 דקות לפני שמעריכים את טיב הראיה - עדיף לבצע הערכה זו מחוץ לחדר הבדיקה.
- ציון 7 ומעלה לרחוק ולקרוב הוא מספק ואפשר להציע ללקוח עדשות לניסיון.


טיפ חשוב: בשלב זה כאשר העדשות בעיניים לא מומלץ להשתמש בפורופטר, ב-autorefractometer או במסגרת בדיקה.

תיקון לרחוק

- על מנת לשפר את הראיה לרחוק, מוסיפים +0.25 או -0.25 לעין הדומיננטית כששתי העיניים פקוחות.
- בודקים אם הראיה לקרוב אינה מושפעת לרעה מהשינוי הזה.
- במקרים מסויימים, תיקון עבור **העין הלא דומיננטית** יכול גם הוא לשפר את הראיה לרחוק.

תיקון לקרוב

- על מנת לשפר את הראיה לקרוב, מוסיפים +0.25 לעין הלא הדומיננטית כששתי העיניים פקוחות.
 - בודקים אם הראיה לרחוק אינה מושפעת לרעה מהשינוי הזה.
 - במקרים מסויימים, תיקון עבור **העין הדומיננטית** יכול לשפר את הראיה לקרוב. חשוב לוודא שאין השפעה על הראיה לרחוק.
- טיפ חשוב:** במידת האפשר עדיף לטשטש מעט את העין הלא-דומיננטית ב- +0.25 או -0.50 ולהישאר ב-ADD נמוך.

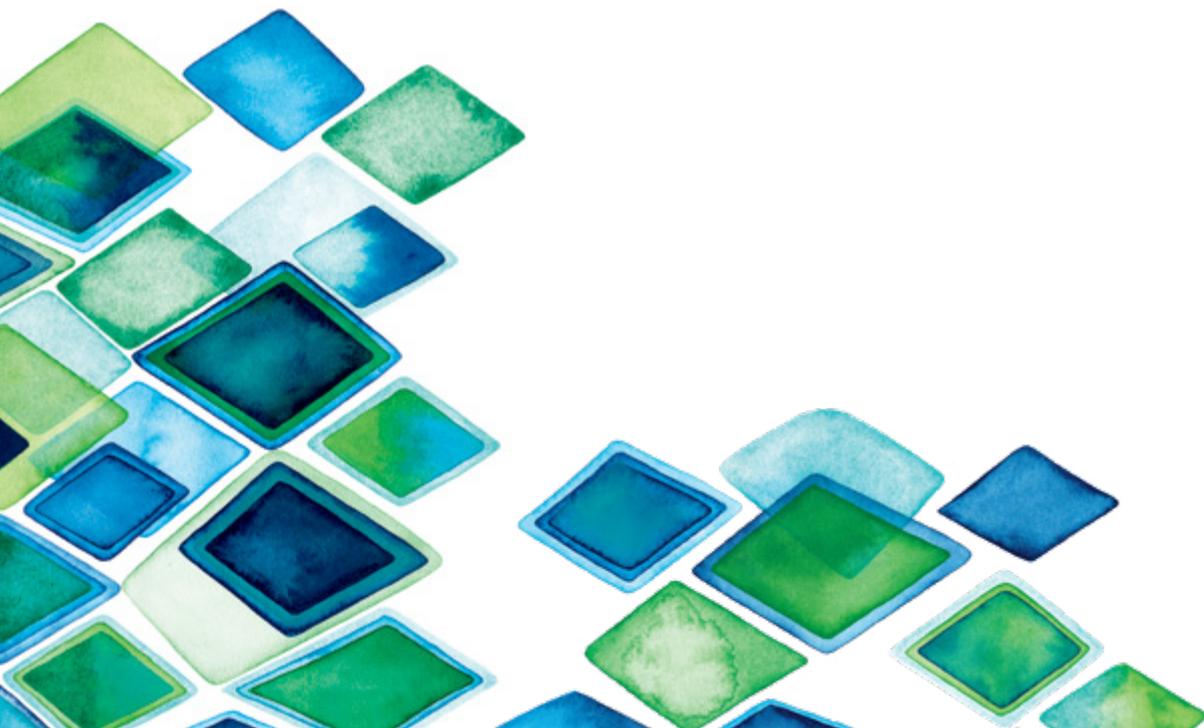



MiSight[®] 1 day

קל להתאים כמו עדשת מגע רכה חד מוקדית

יש לבצע בדיקת רפרקציה למרשם אופטימלי מומלץ להשתמש במסגרת בדיקה ולא בפרומטר, יש לבצע בדיקת רפרקציה עד לקבלת מרשם משקפיים אופטימלי ולבצע איזון דו עיני.

שלב
1

טכניקה מומלצת לאיזון דו עיני:

השתמשו בעדשת +0.75D או עדשה +1.00D לערפול בעין אחת, הוסיפו בהדרגה +0.25D עד לקבלת מקסימום פלוס, חזרו על התהליך בעין השנייה.

בחירה ובדיקת העדשה המתאימה MiSight[®] 1 day יש לחשב את עוצמת העדשה MiSight[®] הראשונית לאחר חישוב Best Sphere Equivalent, יש לחשב Vertex Distance במידת הצורך. יש להמתין כ-5 דקות כשעדשות MiSight[®] 1 day בעיני הפציינט ולאחר מכן לבצע הערכה למרשם אופטימלי תוך שימוש בטכניקה לאיזון דו עיני. יש לתעד את חדות הראייה.

שלב
2

בדקו את המרשם על עדשות המגע:

- יש להוסיף -0.25D בהדרגה, אך ורק אם יש שיפור משמעותי בחדות הראייה לרחוק.
- יש להוסיף +0.25D בהדרגה כל עוד אין השפעה על חדות הראייה לרחוק או על תחושת הראייה. הסובייקטיבית של המטופל.

המלצות ובדיקות מעקב יש להמליץ על זמן הרכבה מינמלי. 6 ימים בשבוע ויותר, 10 שעות ביום ויותר

- יש לתאם בדיקות מעקב לאחר חודש ולאחר מכן מדי 6 חודשים.
- יש להנחות את המטופל (או את הורי המטופל) באופן השימוש והטיפול בעדשה.
- יש לוודא הסתגלות לראייה עם עדשות המגע.

שלב
3

טיפ חשוב:

צל והילות נחשבים לתופעה נורמלית בתחילת התהליך ומוגדרים כתחושת ראייה נורמלית לטיפול זה.

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Material | omafilcon A |
| Water content | 60% |
| Base curve (mm) | 8.7 |
| Diameter (mm) | 14.2 |
| Sphere power | -0.25D to -10.00D (0.25D steps) |
| Optical design | ActivControl [®] Technology |
| Dk/t (at -3.00D) | 28 |
| Pack size | 30 |
| Replacement schedule | Daily disposable |

אנחנו מקבלים החזרות!

לקוחות יקרים,

להלן נוהל ההחזרות המעודכן שלנו:

התנאים לביצוע החזרה:

1. קבלת קופסאות של עדשות באריזתן המקורית, שלמות ומלאות. מטעמים מובנים לא נוכל לקבל קופסאות פתוחות ו/או פגומות.
2. קבלת קופסאות של עדשות עם תוקף של **לא פחות מ-15 חודשים** ורק אם נרכשו בטווח של שנה.
3. לא ניתן להחזיר תמיסות.
4. עדשות ייצור יוחזרו לפי **נוהל החזרות לעדשות ייצור**, מצורף בדף הבא.

כיצד ניתן לבצע החזרה:

1. ניתן לשלוח את ההחזרה עם כץ **בצירוף טופס החזרה**, על הטופס חובה לציין את **סיבת החזרה**. לצערנו לא נוכל לקבל החזרה ללא טופס מצורף. במקרה של החזרת **עדשות ייצור** חובה לרשום מס' SO או מס' תעודת משלוח.
2. במקרה של תלונה, יש להתקשר לשירות לקוחות ולקבל **מספר תלונה**. ללא מספר תלונה, לא נוכל לטפל בפנייתכם.

הזיכוי על ההחזרות יתקבל מיכוי בחשבונית.

בברכה,
קארין פרג, מנהלת מכירות
KPereg@CooperVision.co.il





מדיניות החזרות עדשות ייצור

לקוחות יקרים,

בעדשות ייצור אנו מייצרים במיוחד עבור מטופל ספציפי ונתוניו. לכן, בעת החזרת עדשות, העדשה איננה חוזרת למלאי אלא עוברת להשמדה. מסיבה זו, מצורפת בזאת מדיניות החזרות. אנו מודים לכם על ההבנה ועל שיתוף הפעולה.

| החזרה שנייה | החזרה ראשונה | עדשות | |
|-----------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| ----- | 75% עד חודש | ספריות | מיוצר בארץ: סיליקון הידרוג'ל |
| 50% עד חודש | 100% עד חודש | טוריות+מולטיפוקל | |
| ----- | 75% עד 3 חודשים | ספריות | מיוצר בארץ: הידרוג'ל |
| 50% עד 3 חודשים | 100% עד 3 חודשים | טוריות+מולטיפוקל | |
| ----- | 75% עד 3 חודשים | ספריות | מיוצר בארץ: קשות RGP |
| 50% עד 3 חודשים | 100% עד 3 חודשים | טוריות | |
| ----- | 100% זיכוי לעדשה סגורה | CRT | מיוצר בארץ |
| 50% עד 3 חודשים | 100% עד 3 חודשים | Op8 / soft k | קרניות מעוותות |
| 50% עד חודש | 100% עד חודש | SH soft k | |
| ----- | אין זיכוי | SynergEyes | מיוצר בחו"ל |
| 50% עד 3 חודשים | 100% עד 3 חודשים | Rose k | |
| 50% עד 3 חודשים | 100% עד 3 חודשים | Senso Select Zoom (/ Duo (Procornea | |
| 50% עד 3 חודשים | 100% עד 3 חודשים | ----- | סקלרליות |
| ----- | 100% זיכוי לעדשה סגורה | IP40 | קוסמטיות |

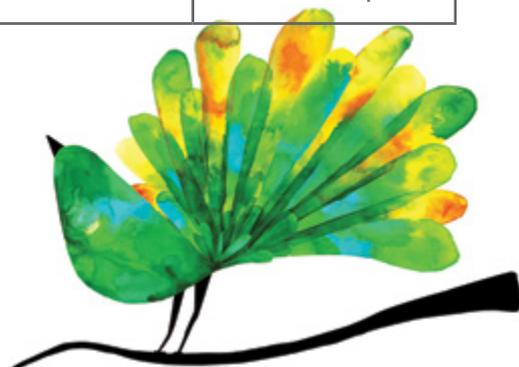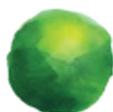

BACK VERTEX DISTANCE CORRECTION TABLE

| 12 mm | SP | 12 mm | 12 mm | SP | 12 mm |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 4.20 | 4.00 | -3.82 | 14.02 | 12.00 | -10.49 |
| 4.48 | 4.25 | -4.04 | 14.71 | 12.50 | -10.87 |
| 4.76 | 4.50 | -4.27 | 15.40 | 13.00 | -11.25 |
| 5.04 | 4.75 | -4.49 | 16.11 | 13.50 | -11.62 |
| 5.32 | 5.00 | -4.72 | 16.83 | 14.00 | -11.99 |
| 5.60 | 5.25 | -4.94 | 17.55 | 14.50 | -12.35 |
| 5.89 | 5.50 | -5.16 | 18.29 | 15.00 | -12.71 |
| 6.18 | 5.75 | -5.38 | 19.04 | 15.50 | -13.07 |
| 6.47 | 6.00 | -5.60 | 19.80 | 16.00 | -13.42 |
| 6.76 | 6.25 | -5.81 | 20.57 | 16.50 | -13.77 |
| 7.05 | 6.50 | -6.03 | 21.36 | 17.00 | -14.12 |
| 7.34 | 6.75 | -6.24 | 22.15 | 17.50 | -14.46 |
| 7.64 | 7.00 | -6.46 | 22.96 | 18.00 | -14.80 |
| 7.94 | 7.25 | -6.67 | 23.78 | 18.50 | -15.14 |
| 8.24 | 7.50 | -6.88 | 24.61 | 19.00 | -15.47 |
| 8.54 | 7.75 | -7.09 | 25.46 | 19.50 | -15.80 |
| 8.85 | 8.00 | -7.30 | 26.32 | 20.00 | -16.13 |
| 9.16 | 8.25 | -7.51 | 27.19 | 20.50 | -16.45 |
| 9.47 | 8.50 | -7.71 | 28.07 | 21.00 | -16.77 |
| 9.78 | 8.75 | -7.92 | 28.98 | 21.50 | -17.09 |
| 10.09 | 9.00 | -8.12 | 29.89 | 22.00 | -17.41 |
| 10.40 | 9.25 | -8.33 | 30.82 | 22.50 | -17.72 |
| 10.72 | 9.50 | -8.53 | 31.77 | 23.00 | -18.03 |
| 11.04 | 9.75 | -8.73 | 32.73 | 23.50 | -18.33 |
| 11.36 | 10.00 | -8.93 | 33.71 | 24.00 | -18.63 |
| 12.01 | 10.50 | -9.33 | 34.70 | 24.50 | -18.93 |
| 12.67 | 11.00 | -9.72 | 35.71 | 25.00 | -19.23 |
| 13.34 | 11.50 | -10.11 | 37.75 | 26.00 | -19.75 |

DIOPTER <=> MM CONVERSION TABLE

| mm | dpt | mm | dpt | mm | dpt |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| 5.50 | 61.36 | 6.90 | 48.91 | 8.30 | 40.66 |
| 5.55 | 60.81 | 6.95 | 48.56 | 8.35 | 40.42 |
| 5.60 | 60.27 | 7.00 | 48.21 | 8.40 | 40.18 |
| 5.65 | 59.73 | 7.05 | 47.87 | 8.45 | 39.94 |
| 5.70 | 59.21 | 7.10 | 47.54 | 8.50 | 39.71 |
| 5.75 | 58.70 | 7.15 | 47.20 | 8.55 | 39.47 |
| 5.80 | 58.19 | 7.20 | 46.88 | 8.60 | 39.24 |
| 5.85 | 57.69 | 7.25 | 46.55 | 8.65 | 39.02 |
| 5.90 | 57.20 | 7.30 | 46.23 | 8.70 | 38.79 |
| 5.95 | 56.72 | 7.35 | 45.92 | 8.75 | 38.57 |
| 6.00 | 56.25 | 7.40 | 45.61 | 8.80 | 38.35 |
| 6.05 | 55.79 | 7.45 | 45.30 | 8.85 | 38.14 |
| 6.10 | 55.33 | 7.50 | 45.00 | 8.90 | 37.92 |
| 6.15 | 54.88 | 7.55 | 44.70 | 8.95 | 37.71 |
| 6.20 | 54.44 | 7.60 | 44.41 | 9.00 | 37.50 |
| 6.25 | 54.00 | 7.65 | 44.12 | 9.05 | 37.29 |
| 6.30 | 53.57 | 7.70 | 43.83 | 9.10 | 37.09 |
| 6.35 | 53.15 | 7.75 | 43.55 | 9.15 | 36.89 |
| 6.40 | 52.73 | 7.80 | 43.27 | 9.20 | 36.68 |
| 6.45 | 52.33 | 7.85 | 42.99 | 9.25 | 36.49 |
| 6.50 | 51.92 | 7.90 | 42.72 | 9.30 | 36.29 |
| 6.55 | 51.53 | 7.95 | 42.45 | 9.35 | 36.10 |
| 6.60 | 51.14 | 8.00 | 42.19 | 9.40 | 35.90 |
| 6.65 | 50.75 | 8.05 | 41.93 | 9.45 | 35.71 |
| 6.70 | 50.37 | 8.10 | 41.67 | 9.50 | 35.53 |
| 6.75 | 50.00 | 8.15 | 41.41 | 9.55 | 35.34 |
| 6.80 | 49.63 | 8.20 | 41.16 | 9.60 | 35.16 |
| 6.85 | 49.27 | 8.25 | 40.91 | 9.65 | 34.97 |

